

ENDO STRATUS kar Simpel, Stevig, Stabiel

- Handig transport en ruimte voor twee 5 liter CO₂ tanks.
- De ENDO STRATUS® irrigatiepomp en CO₂ insufflator kunnen op elkaar op het bovenste plankje worden geplaatst.
- De ENDO STRATUS irrigatiepomp en CO₂ insufflator worden bevestigd met niet-poreuze riemen, voor gemakkelijk vervoer tussen de kamers.

ENDO STRATUS™ kar bestelinformatie

artikelnummer Omschrijving

EGA-7040	Dubbele yoke met DIN-connector
EGA-2079	Bevestigingsbeugel – dubbele yoke
EGA-7029	Dubbele yoke met PIN-connector
EGA-9042	ENDO STRATUS kar



ENDO STRATUS® pompen bestelinformatie

artikelnummer Omschrijving

EGA-500E	ENDO STRATUS irrigatiepomp
EGA-501E	ENDO STRATUS CO ₂ insufflator
EGA-7011	3 foot (91,44 cm) tankslang (hoge druk)
EGA-7024	9 foot (274,32 cm) tankslang (hoge druk)
EGA-2071	NIST adapter
EGA-7026	DIN tankaansluiting
EGA-7012	PIN index yoke tankaansluiting

MEDIVATORS®, ENDO STRATUS®, ENDO SMARTCAP®, ENDOGATOR® en Y-OYPSY® zijn gedeponeerde handelsmerken van Medivators Inc.



Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387
www.medivators.eu

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel (UK) Limited
Campfield Road
Shoeburyness, Essex
SS3 9BX,
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1702.291878
Fax: +44 (0) 1702.290013

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.
1A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Fax: +65.6225.6848

Cantel Medical Devices (China) Co. Ltd.
Unit 804-805, Innov Tower Block A,
Hongmei Road, Xuhui 200233 Shanghai
Tel: +86 21 60161380
Fax: +86 21 61210913

ENDO STRATUS[®]


Irrigatiepomp en CO₂ insufflator



ENDO STRATUS®

Irrigatiepomp en CO₂ insufflator

Patiënten Pijn en ongemak CO₂ vs. Omgevingslucht

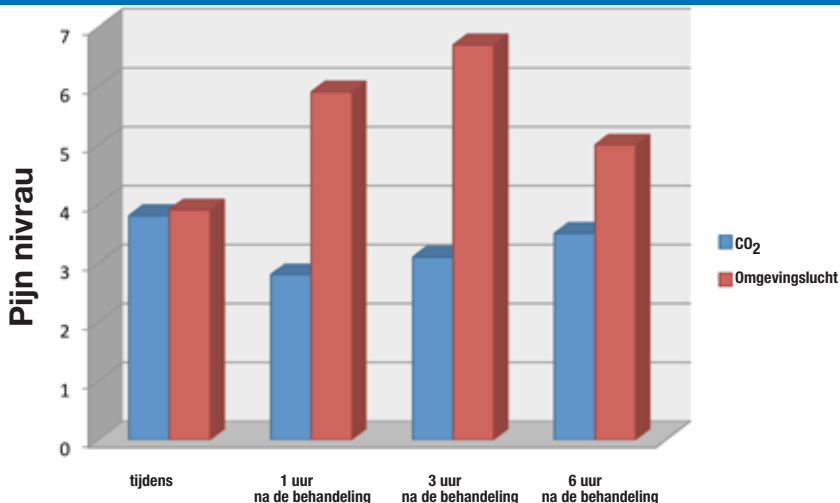

Er is aangetoond dat CO₂ insufflatie tot snellere procedures, kortere herstelperiodes en meer comfort voor de patiënt leidt.

Snellere patiëntendoorstroming*

- Verbeterde caecale intubatiesnelheid¹
- Grotere intubatiediepte in de dunne darm²
- 38% minder verpleegzorg nodig⁴

Grotere patiënttevredenheid

- Minder ongemak, pijn en opgeblazen gevoel^{3,4,1}
- Kortere herstelperiodes⁴
- Minder uitzetting door gassen

¹ Singh, R., Neo, E., & Nordeen, N. (2012, juli). Carbon dioxide insufflation during colonoscopy in deeply sedated patients. *World Journal of Gastroenterology*, 18(25), 3250-3253.

² Bretthauer, MD, PhD, M. (2010). Turning science into clinical practice – the case of carbon dioxide insufflation. *Endoscopy* 2010, 42(11), 1104-1105. doi:http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0030-1255973

³ Bretthauer, MD, PhD, M. (2007, September). Carbon dioxide insufflation improves intubation depth in double-balloon enteroscopy: a randomized, controlled, double-blind trial. *Endoscopy* 2007, 39(10), 1064-1067. doi:DOI 10.1055/s-2007-966990

⁴ Lynch, MBA, BSN, RN, Hayes BSN, RN, CGRN, Buffum DNSc, APRN, CS. (2012). Insufflation Using CO₂ vs Room Air During Colonoscopy: Comparison of Patient Comfort, Recovery Time, and Nursing Resources [PowerPoint slides]. Veterans Affairs Medical Center San Francisco.

Simpele aanpassing, significante verbetering

ENDO STRATUS® CO₂ insufflator

- Wordt 150 keer sneller geabsorbeerd dan omgevingslucht en wordt snel geëlimineerd via de longen
- Verwarmd CO₂ – 37°C
- Variabele flow instellingen –
 - laag (1,4 l/min)
 - medium (2,4 l/min)
 - hoog (3,5 l/min)

Compatibel met

- MEDIVATORS® ENDO SMARTCAP® lensreiniging en insufflatieslangen
- Tank (D of E) of NIST CO₂ wandaansluiting
- Alle belangrijke GI-endoscopen



Verbeterde visualisatie en meer patiëntencomfort

ENDO STRATUS® irrigatiepomp

- Warm water technologie minimaliseert de kans op spastisch colon
- Automatische prime-knop zorgt voor onmiddellijke irrigatie, zodra het voetpedaal wordt ingedrukt
- Irrigatie via waterjetkanaal of biopsiekanaal (Y-OPSY® biopsiedop)

Compatibel met

- MEDIVATORS® ENDOGATOR® slangen en aansluitingen
- Alle belangrijke GI-endoscopen

